

(((LOOP)))



MDS20

- ! A termék megfelelő működésének biztosítása érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, és fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedésekre.

Használati környezet

Az elektromos áramütés vagy a mechanikai alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használja a terméket nedves vagy poros környezetben.

Ne használja ezt a terméket, ha a beltéri hőmérséklet 40 ° C felett van.

Ne használja ezt a terméket szabadban vagy közvetlen napfényben. A terméket sima felületre kell helyezni.

Kérjük, várjon egy órát, miután a terméket alacsony hőmérsékletű területről magas hőmérsékletű helyre helyezte, hogy elkerülje a vízgőzök kondenzálódását a készüléken és a problémákat.

Azoknak az embereknek, akikre az alábbi feltételek vonatkoznak, nem tanácsos használni a készüléket. Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt konzultáljon orvosával:

Kezelés alatt álló vagy rosszul érző emberek;

Emberek, akiknek rosszindulatú daganatuk van;

Terhes nők vagy menstruációs nők;

Szívproblémákkal küzdő emberek;

Csontritkulásban szenvedő emberek;

Emberek, akik szívritmus-szabályozókkal vagy más beültetett elektronikus orvostechnikai eszközökkel rendelkeznek;

Mesterséges végtaggal rendelkezők;

Emberek, akik érzékenyek a rezgésre vagy az intenzív testmozgásra.

A használat során figyelembe veendő információk

Használat előtt kérjük, tegye félre az óráját, telefonját vagy más értéktárgyait, kulcsait, késeit vagy más éles tárgyait, hogy elkerülje a tárgyak, vagy a saját sérülését.

A termék használata közben tilos a dohányzás.

Kérjük, ne használja ezt az eszközt, ha orvosi eszközöket hord.

Kérjük, ne használja ezt az eszközt terápiás célokra.

Ne használja ezt a készüléket közvetlenül étkezés vagy ivás után.

Használat közben tartsa távol a gyermekeket és az állatokat a készüléktől.

Tilos az ujját vagy tárgyát a vibráló lemez és az alap közé helyezni.

A készülék használatakor ajánlott a 10 éven aluli gyermekek és 60 év feletti gyermekek felügyelete.

Az eszköz által támogatott maximális súly 30 kg, mert csak a lábát helyezheti rá, és nem állhat rajta teljes testtömegével.

Egyszerre csak egy személy használhatja a készüléket.

FIGYELEM



A készülék szétszerelése, javításának vagy átalakításának megkísérlése illetéktelen személy által nem engedélyezett, mivel ez a készülék károsodását vagy áramütést okozhat. Ha bármilyen


probléma merül fel az eszközön, azonnal forduljon a gyártóhoz vagy az eladóhoz.

Kapcsolja ki a készüléket, és áramtalanítsa ha a következő helyzetek valamelyike előfordul:

- Víz vagy folyadék jutott az egységre vagy a távirányítóra.
- a készülék meghibásodásokat jelez, vagy a belső alkatrészek láthatóak.
- Edzés közben rosszul érzi magát.
- Áramszünet.
- viharok nagy villamos kisülésekkel.

Ellenőrizze, hogy a kimeneti feszültség kompatibilis-e a készüléken megadott feszültséggel. Ne kezelje a készüléket nedves kezekkel, az áramütés elkerülése érdekében.

Tartsa a tápkábelt a fejénél fogva, és ne a kábelnél, amikor ki akarja húzni. Kapcsolja ki a készüléket a gombbal, és csak ezután húzza ki a tápkábelt, és ha hosszú ideig nem kívánja használni a készüléket. Ne használja újra a készüléket, ha a tápkábel sérült, kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a kábelt és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy az eladóval.

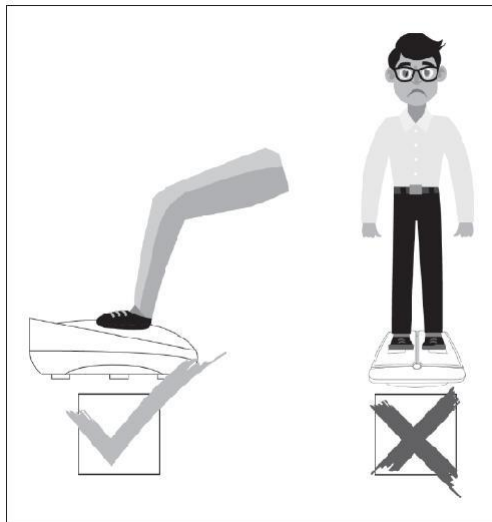

A csomag tartalma:

Távirányító



AAA elemek



Vibromassázs készülék



Hálózati adapter




Termék leírás

Fedőlap

Gumírozott felület

Anyaggal borított masszázshengerek

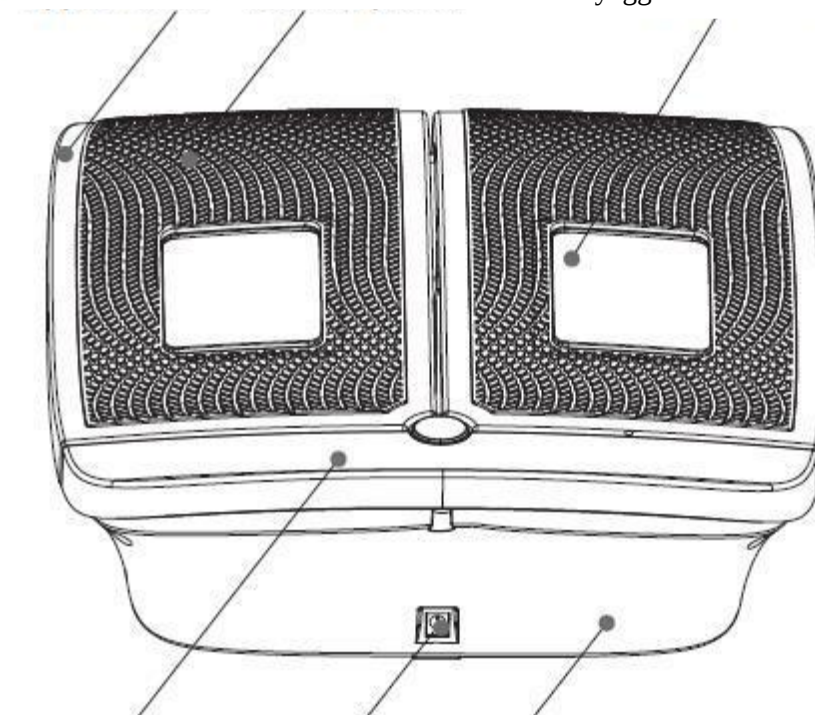


Kijelző fedő

Bemenet

Alap burkolat

Használati útmutató

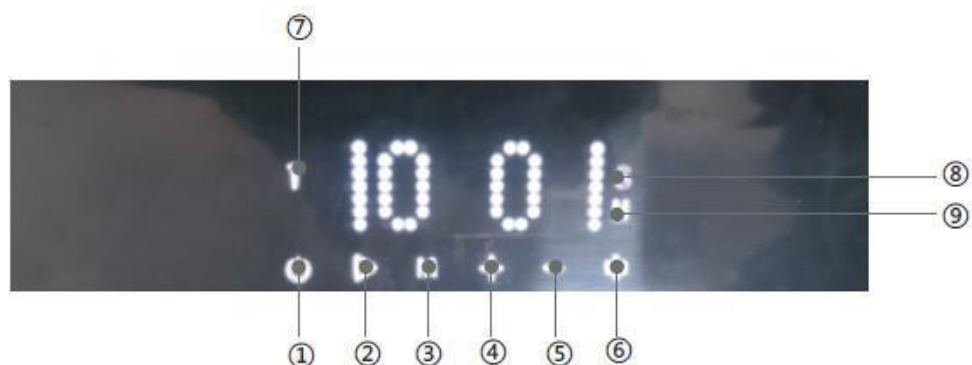

① Start gomb

④ Sebesség fel

⑦ Idő

② Start/stop

⑤ Sebesség le


⑧ Sebesség

③ Mozgás (be- vagy kikapcsolt masszázshenger
segítségével)

⑥ Automata mód

⑨ M kijelző

Távírányító

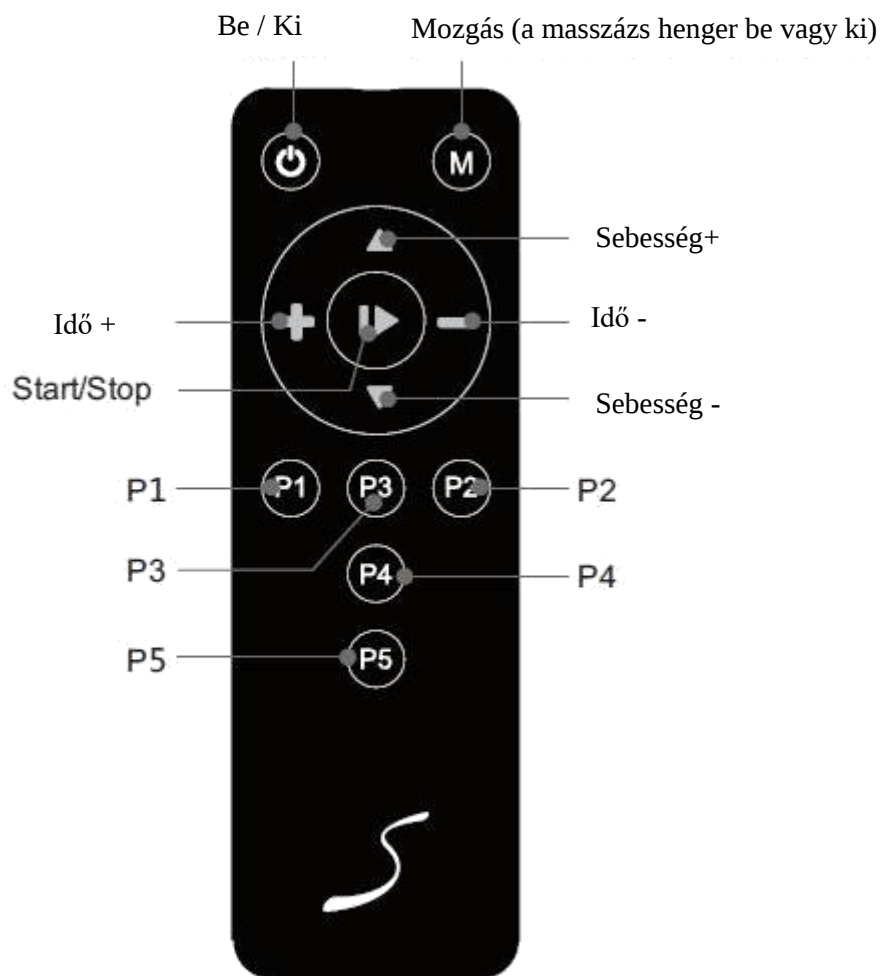

Automata program


Sebességszintek 1-20

A = mozgás a masszázshenger nélkül


B = mozgás a masszázshengerrel

Az előre beállított programok mindegyike 10 perc, a Start megnyomása után megkezdődik a visszaszámlálás.


P1

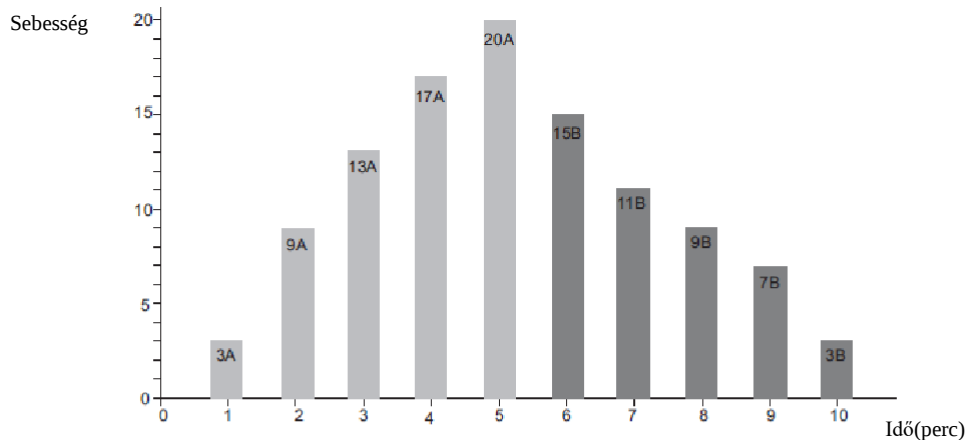

P2

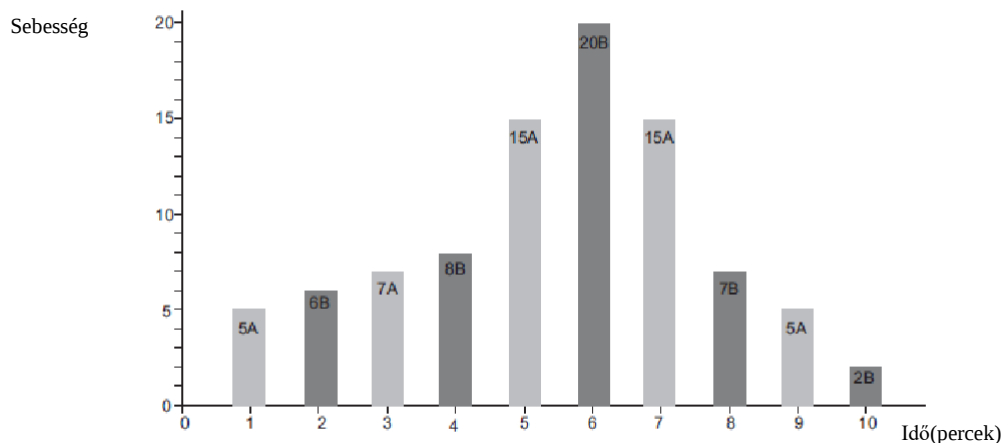


P3

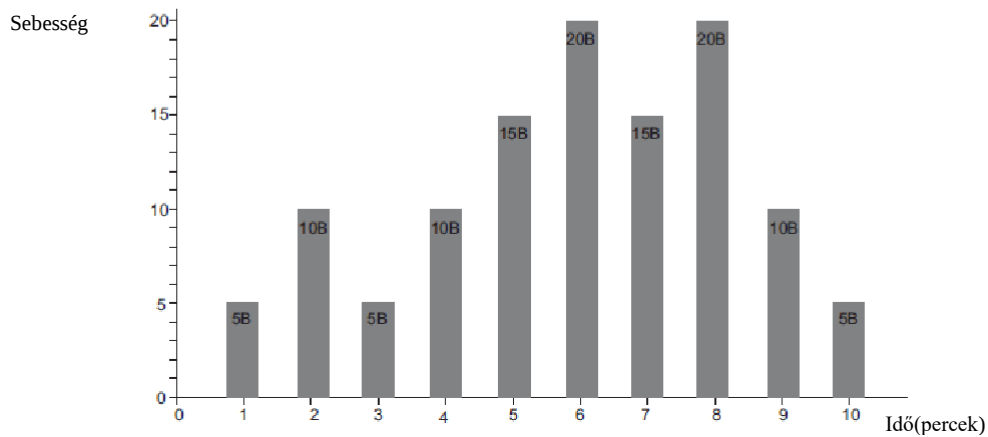


P4

Sebesség

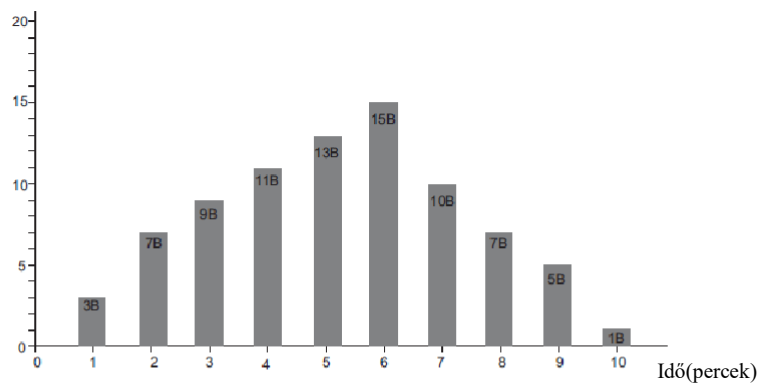



P5

Sebesség

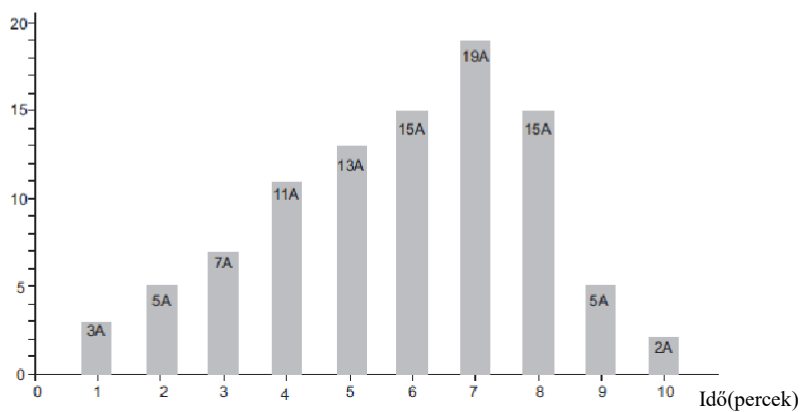

Használat

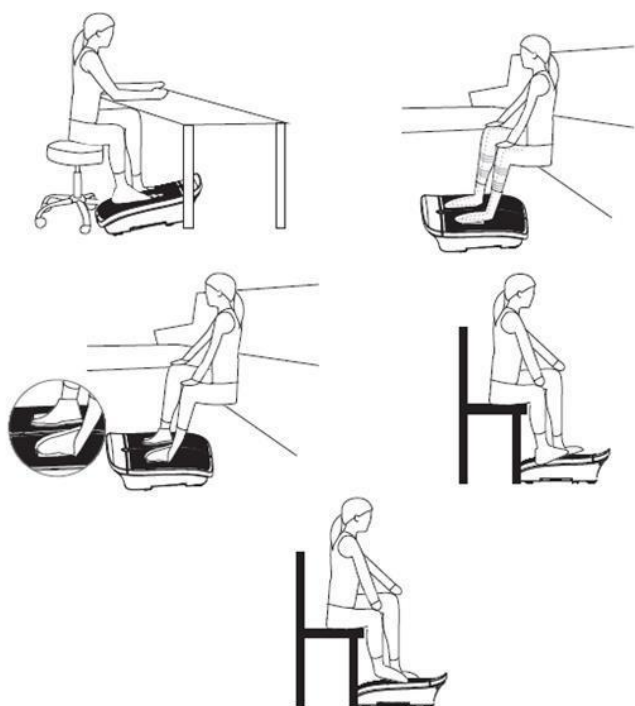

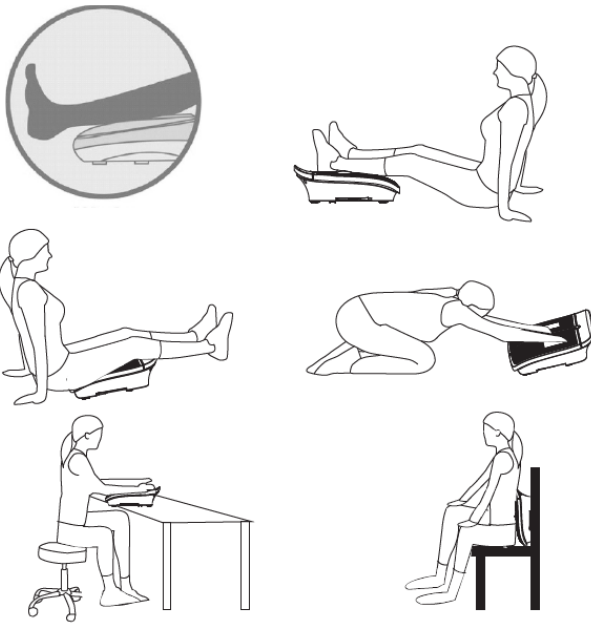

Tárolás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket a gombból, és húzza ki a tápkábelt. A vibrációs lemezt és a készülék házát nedves ruhával megtisztíthatja, majd egy száraz ruhával törölheti le.



MEGJEGYZÉS: Ne tisztítsa a készüléket maró vagy súroló hatású mosószerekkel, hígítva sem, ezek korrodálhatják a házat, és eltörhet. Ne öntsön vizet vagy folyadékokat a készülékre, mert az rövidzárlatot okozhat.

VEZÉRLŐ

A vezérlőt csak száraz ruhával törölje le, soha ne nedves ruhával, mivel ez az elektronikus alkatrészek megsérülését okozhatja.

Ha tárolni szeretné, ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb ki van-e kapcsolva, és húzza ki a tápkábelt.

Alaposan tisztítsa meg a portól és a szennyeződéstől, és tárolja tiszta helyen, magas hőmérséklet vagy páratartalom nélkül. Ha nem kívánja hosszú ideig használni, akkor javasoljuk, hogy tegye egy porzsákba, hogy megvédje a portól.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség: 100-240v, 50 / 60Hz

Kimeneti feszültség: 24V, 2,5A

Támogatott maximális súly: 30 kg